

## Bau- und Gebrauchsanweisung

(Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und  
bewahren Sie diese gut auf!!!)



Model:

**MED JADE BED**

CE

Danke dass Sie sich für unser Med Jade Bett entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, vor Gebrauch, sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

## Inhalt

1. Einführung
  - a) Charakter, Struktur, Leistung und Arbeitsprinzip
  - b) Einzelteile
  - c) Handbedienung
  - d) Anwendungsmöglichkeiten
  
2. Montageanleitung
  - a) Allgemeine Informationen
  - b) Verfahrensvorgang
  - c) Montage
  - d) Einstellung
  
3. Gebrauch
  - a) Handbedienung
  - b) Handmassagegerät
  
4. Instandhaltung
  - a) Allgemeine Informationen
  - b) Sicherheitshinweise
  - c) Aufbewahrung
  - d) Sicherungsaustausch
  
5. Produktspezifikationen
6. Hinweise zum Umweltschutz

## **1. Einführung**


- a) **Charakter**
  - Das Massagebett wurde gemäß dem ergonomischen Prinzip konstruiert.
  - Geringer Geräuschpegel
  - 19 verschiedene Zeitstufen (5-95 Minuten)

- Hochwertige Jade Massage Struktur (6 Jadekugeln im Rückenbereich, sowie 4 Jadekugeln im Beinbereich)
- Infrarotwärme, Handmassagegerät und Jade Massage wurden in einem Gerät miteinander verbunden.
- Multifunktionshandmassagegerät mit 8 Jadesteinen und einer Infrarotkugel (erreichbare Temperatur bis zu 55°C).
- Die eingearbeiteten Massageköpfe sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, es können 4 verschiedene Temperaturen gewählt werden (40-55°C).
- Einfache Transportfähigkeit


### Struktur, Leistung und Arbeitsprinzip

Dieses neue Jade Massage Bett (intelligentes Massagebett) basiert auf dem Prinzip der modernen Elektronen Technologie. Es wurde aus hochwertigen Jadesteinen gefertigt und wendet die moderne Infrarotwärme und Lichtwellen an. Es besteht aus Rücken- und Beinmassage, sowie einem Handmassagegerät und einer Handbedienung. Die vielfältigen Funktionen dieses Bettes verbindet Infrarotwärme mit entspannender Rücken- und Beinmassage. Die niedrige Voltzahl, die leichte Handhabung und die kontinuierliche Leistung lassen dieses Bett zu einem einzigartigen Erlebnis für Ihren Körper, Geist und Seele werden.

### b) Einzelteile

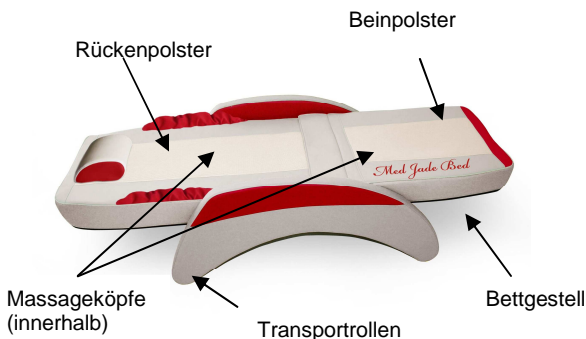

### c) Handbedienung

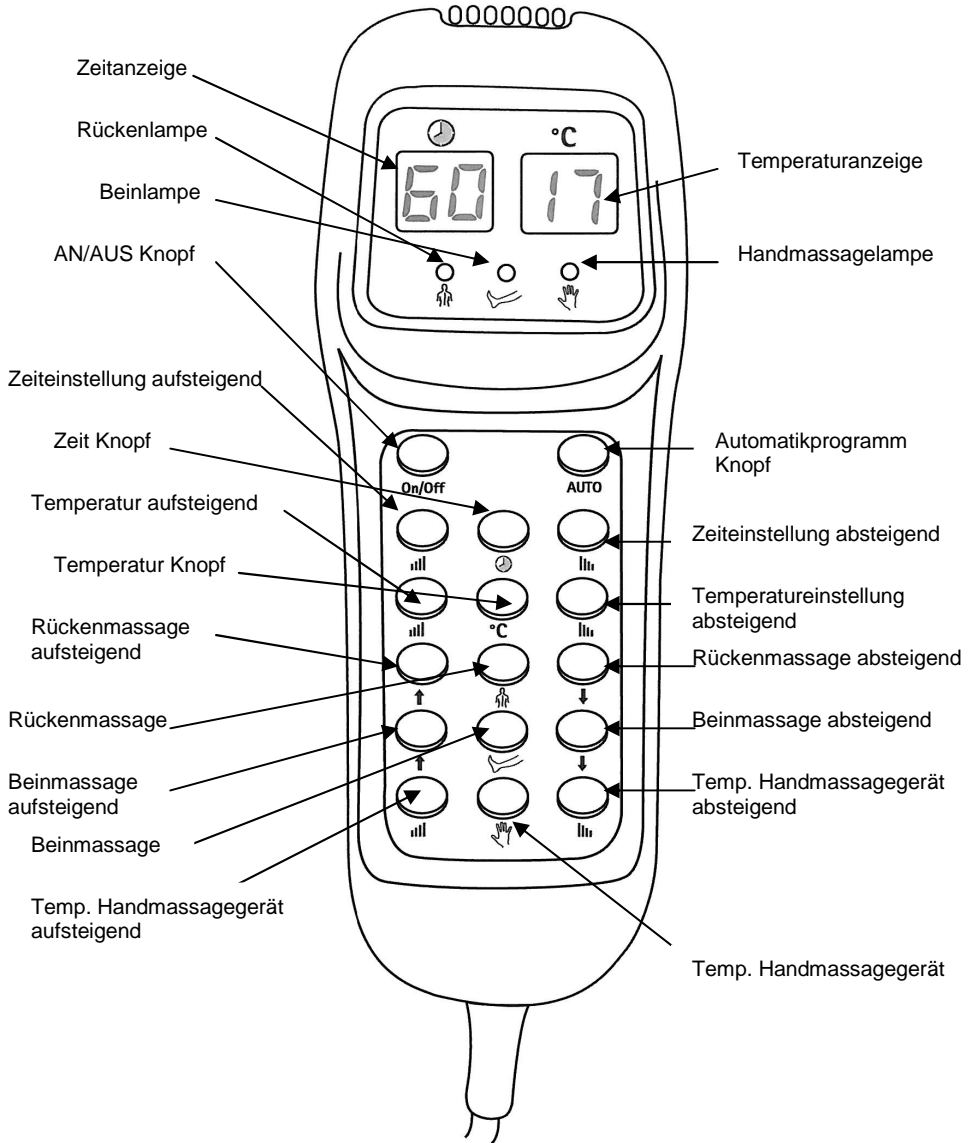

### **d) Anwendungsmöglichkeiten**

Das Produkt kann unterstützend gegen Bluthochdruck, chronische Gastritis, Arthritis, Schlafstörungen, Verstopfungen, Wirbelerkrankungen, Unterleibsschmerzen, Prostata,... eingesetzt werden.

**Folgende Personen sollten das Massagebett nicht benutzen bzw. vor Gebrauch Ihren Arzt konsultieren:**

- Schwangere
- Kinder
- Personen die an Osteoporose leiden
- Personen mit bösartigen Tumoren bzw. Krebsgeschwüren
- Personen mit schwerem Trauma
- Personen die an Hautkrankheiten leiden
- Personen die an einer Herzkrankheit leiden bzw. einen Herzschrittmacher haben
- An zu hohem Bluthochdruck leiden
- sich von einer Krankheit und/oder einer Operation erholen
- hohes Fieber haben
- An einer Deformation/Bruch von Knochen speziell der Wirbelsäule leiden.
- Sowie Personen die allergisch auf Elektrizität und/oder Wärme reagieren.

## **2. Montageanleitung**

### **a) Allgemeine Informationen**

1. Das Bett bitte auf einer sauberen und ebenen Fläche aufbauen.
2. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Bett.
3. Benutzen Sie das Massagegerät niemals in einer feuchten Umgebung oder bei dichter Staub- oder Rauchentwicklung, da dies zu Störungen des elektrischen Sensors und zu Fehlfunktionen führen kann.
4. Benutzen Sie das Massagebett nicht in Räumen mit einer zu hohen Raumtemperatur und stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Heißluftöfen und Heizöfen. Bitte direkte Sonneneinstrahlung meiden, da dies durch Überhitzung von

Teilen des Massagebettes zum Ausbruch eines Feuers führen kann.

5. Bitte den Zusammenbau gemäß Skizze und Anleitung durchführen.

### **b) Verfahrensvorgang**

1. Bitte das Rückenpolster, sowie das Beinpolster aus der Verpackung nehmen und auf das Bettgestell legen.
2. Entnehmen Sie bitte die Einzelteile (Adapter, Handbedienung, Handmassagegerät, Kabel,...) aus dem Fertigteile Karton.
3. Schließen Sie die Handbedienung an der entsprechenden Buchse des Massagepolsters an und befestigen Sie den Stecker mit den dazugehörigen Muttern.
4. Schließen Sie nun das Handmassagegerät an der entsprechenden Buchse des Massagepolsters an und befestigen Sie den Stecker mit den dazugehörigen Muttern.
5. Nun verbinden sie bitte mit dem entsprechenden Verbindungskabel das Rückenpolster mit dem Fußpolster.
6. Verbinden Sie nun das Elektrokabel mit der Netzsteckdose des Massagebettes, um das Gerät einzuschalten bitte den Stecker an Ihren Hausstromkreis anschließen.


### **ACHTUNG:**

Es kann zu Schwierigkeiten kommen, falls Sie zuerst den „Power“-Schalter des Bettes betätigen, ohne davor das Massagebett an den Stromkreis angeschlossen zu haben.

### **c) Montage**


Schritt 1:

Entnehmen Sie bitte sämtliche Einzelteile, Bettgestell, Armlehnen, den Zubehör Karton, sowie die Schrauben und Werkzeuge, aus der Verpackung und legen Sie diese für die Montage bereit.

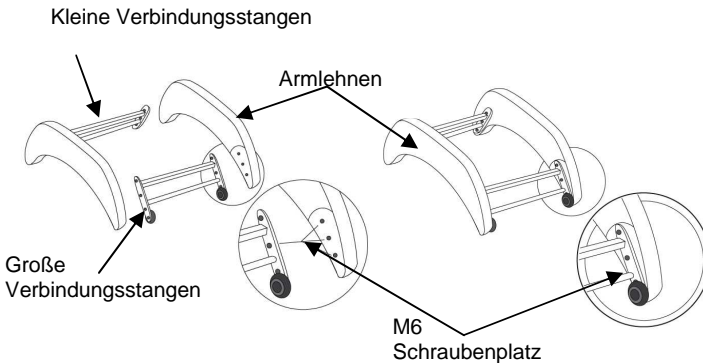


**Schritt 2:**

Platzieren Sie bitte die große Verbindungsstange so, dass diese an den dafür vorgesehenen 3 Markierungen der Armlehnen mit M6 Schrauben montiert werden können (ziehen Sie bitte die Schrauben nicht zu sehr an, um eventuell weitere Bauteile justieren zu können). Die Montierung der kleinen Verbindungsstange bitte identisch handhaben.

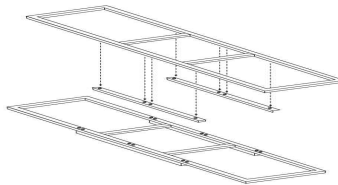

**Schritt 3:**


Verbinden Sie nun die 2 unteren Bettrahmen und die Verbindungsstangen mit 8 M8X30 Schrauben (ziehen Sie bitte die Schrauben nicht zu sehr an, um eventuell weitere Bauteile justieren zu können).

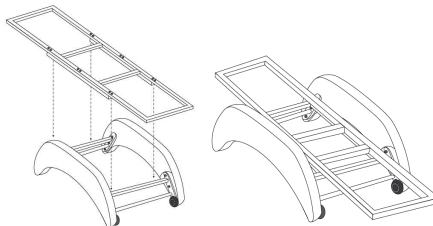

**Schritt 4:**

Den Bettrahmen bitte auf die Verbindungsstangen der Armlehnen platzieren und mit 4 M8X40 Bolzen, sowie den Dichtungsscheiben und 4


M8 Muttern montieren. Bitte die 8 M8X30 Schrauben des Bettgestells kräftig anziehen. Achten Sie darauf, dass alle 4 Standfüsse des Bettes gleichzeitig Bodenkontakt haben und ziehen Sie einzeln alle Schrauben und Muttern kräftig nach.

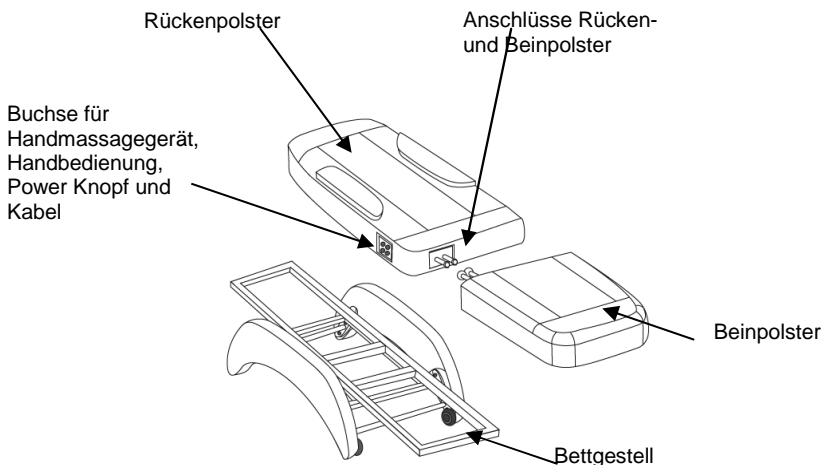

**Schritt 5:**

Legen Sie das Rücken- sowie das Beinpolster auf den Bettrahmen. Wie in der Abbildung gezeigt, bitte das Rückenpolster mit dem Beinpolster verbinden, indem Sie den 3. und 5. Anschlussdraht dementsprechend miteinander verbinden.

Justieren Sie nun die richtige Position des Rücken- und Beinpolsters

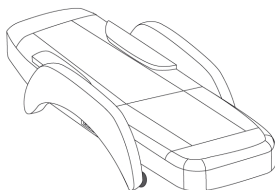





**Schritt 6:**

Wie in der Abbildung gezeigt, bitte das Handmassagegerät und die Handbedienung an der jeweils entsprechenden Buchse anschließen. Um nun Ihre Massage genießen zu können, muss das Bett nur noch an den

Stromkreis angeschlossen werden, indem Sie den Stecker in die Steckdose einfügen.

#### **d) Einstellung**

1. Zum Ein- bzw. Abschalten des Gerätes betätigen Sie bitte den Power-Knopf.
2. Drücken Sie die „ON/OFF“ Taste, danach die Zeittaste um die von Ihnen gewünschte Zeit mit den Tasten „“ (aufsteigend) „“ (absteigend), einzugeben (5-95 Minuten)
3. Durch Drücken der Temperaturtaste kann die gewünschte Temperatur mit den Tasten „“ (aufsteigend) „“ (absteigend), eingestellt werden (40°-55°C).
4. Um das automatische Massageprogramm zu aktivieren, drücken Sie bitte die „Auto“-Taste.

#### **ACHTUNG:**

- Bitte die Handbedienung vor Anschluss an den Stromkreis an das Bett verbinden.
- Bitte eine für Sie als angenehm gefühlte Temperatur wählen. Die Anfangstemperatur sollte niedriger geschaltet werden um Verbrennungen zu vermeiden.
- Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie zuerst die „ON/OFF“-Taste danach drücken Sie bitte den Powerknopf.

## **3. Gebrauch**

### **a) Handbedienung**

Vergewissern Sie sich, dass die Handbedienung korrekt angeschlossen wurde.

AUTO Funktion (wenn Sie diese Funktion wählen, wird das automatische Massageprogramm gewählt, Zeit: 60 Minuten)

1. Bitte „ON/OFF“-Taste betätigen um das Gerät einzuschalten.
2. „AUTO“-Taste drücken um die Autofunktion zu aktivieren.
3. Auf dem Display erscheint nun die Zeit (60 Minuten) sowie die Temperatur.



4. Wenn Sie die „AUTO“-Taste wiederholt betätigen, beenden Sie diese Funktion.

Bei der Auto Funktion kann die Temperatur des Handmassagegerätes und des Rückenpolster manuell eingestellt werden, während die Rücken- und die Beinmassage nicht verändert werden kann.

### Manuelle Einstellung

1. Bitte „ON/OFF“-Taste betätigen um das Gerät einzuschalten.
2. Durch drücken der „Temperatur“-Taste können Sie nun die von Ihnen gewünschte Temperatur mit den Tasten „“ („aufsteigend) „“ (absteigend), einstellen ( 40°-55°C)
3. Durch drücken der „Zeit“-Taste können Sie die Zeit mit den Tasten „“ („aufsteigend) „“ (absteigend), einstellen ( 5-95 Minuten)
4. Durch drücken der „Rücken“-Taste aktivieren Sie die Rückenmassage. Sie können den zu massierenden Rückenbereich durch die Pfeiltasten „“ und „“, fixieren.
5. Durch drücken der „Bein“-Taste aktivieren Sie die Beinmassage. Sie können den zu massierenden Beinbereich durch die Pfeiltasten „“, und „“, fixieren.
6. Wenn Sie die Wärmetherapie bei allen Bereichen (Rücken, Bein und Handmassagegerät) anwenden, wird auf dem Display die Temperatur des Rückenbereiches angezeigt.

### b) Handmassagegerät

1. Drücken Sie die „ON/OFF“-Taste um das Gerät zu starten
2. Drücken Sie die Taste „Temperatur Handmassagegerät“ um das Handmassagegerät zu starten.
3. Stellen Sie die von Ihnen gewünschte Temperatur (40°C - 55°C) mit den „“, und „“, ein.

Mit dem Handmassagegerät können Sie die Körperteile (Hals, Nacken,...) massieren, welche das Bett nicht erreicht, somit können Sie jeden einzelnen Körperpunkt effektiv massieren.

### HINWEIS:

Trinken Sie nach der Massage ausreichend warmes Wasser, was dazu beitragen kann Schmerzen zu lindern.

## 4. Instandhaltung

### a) Allgemeine Informationen

Vor Benutzung bitte prüfen:

- Sind die Massageköpfe in einwandfreiem Zustand?
- Wurde der Stecker richtig in die Steckdose gesteckt?
- Wird die Temperaturanzeige auf dem Display korrekt angezeigt?
- Leuchten alle Massageköpfe des Handmassagegerätes?
- Wurden alle Schrauben und Muttern des Bettrahmens fest angezogen?
- Funktioniert das Handmassagegerät und der Powerknopf fehlerfrei?
- Wurde die richtige Temperatur des Handmassagegerätes eingestellt (40°-55°C)

Während der Benutzung zu beachten:

- Tragen Sie bitte während der Massage reine Baumwollkleidung und entfernen Sie Ihren Gürtel und Ihre Krawatte.
- Versuchen Sie bitte nicht einzuschlafen.
- Allergiker sollten das Massagebett nur unter der Aufsicht eines Arztes benutzen.
- Vermeiden Sie bitte eine zu lange Massage, da übertriebene Massagen den Körper auch schädigen können (Muskelkrämpfe, Verbrennungen,...).
- Benutzen Sie das Kissen nie auf offenen Wunden, Prellungen und im Gesichtsbereich, da dies zu Verletzungen führen kann. Im Zweifelsfall sprechen Sie vorher mit Ihrem Arzt.

Nach der Benutzung zu beachten:

- Ist das Temperatur Display ausgeschaltet?
- Sind alle Lichter des Handmassagegerätes ausgeschaltet?
- Wurde der Stecker aus der Steckdose entfernt?
- Wurde der Power Knopf ausgeschaltet?

### b) Sicherheitshinweise


- Das Gerät nur an den richtigen Stromkreislauf anschließen
- Nach Gebrauch, sowie bei Gewitter das Gerät vom Stromkreis trennen
- Den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen

- Bitte keine schweren Gegenstände auf die Handbedienung, das Handmassagegerätes noch auf das Bett selber stellen.
- Verwenden Sie bitte nicht gleichzeitig dieselbe Steckdose an der das Massagebett angeschlossen wurde für leistungsstarke Elektrogeräte.
- Ziehen Sie nicht gewaltsam und/oder mit nassen Händen am Stecker.
- Bedienen Sie die Fernbedienung nicht mit nassen Händen
- Wählen Sie eine für Sie angenehme Temperatur, eine zu hoch eingestellte Temperatur kann zu Verbrennungen führen.
- Bei Störungen bitte nicht selbst reparieren, sondern das Gerät an den zuständigen Kundendienst schicken. Bei Eigenreparaturen erlischt nicht nur jeglicher Garantieanspruch, es können auch Gefahren entstehen.
- Falls Störungen auftreten das Bett bitte sofort vom Stromkreis trennen und den Kundendienst informieren.
- Bei defekten Stromkabel bitte nicht eigenhändig austauschen, sondern eine dazu berechnigte Person informieren.
- Nicht in feuchten Bereichen (Bad) benutzen
- Stoppen Sie die Massage sofort, falls Sie Schmerzen verspüren


### **c) Aufbewahrung**

- Schalten Sie das Gerät an der Power Taste aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose wenn der Massagesessel über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Reinigen Sie das Bett vorsichtig mit milder Seife und warmen Wasser wenn es länger nicht benutzt wird. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger
- Das Bett nur auf eine ebene Fläche stellen.
- Halten Sie das Gerät von stark Hitzeausstrahlenden bzw. leicht entflammaren Geräten fern.
- Bei Nichtgebrauch das Bett bitte mit einem sauberen Überzug abdecken.
- Bewahren Sie das Massagebett nicht in feuchten Räumen auf, stellen Sie keine schweren Gegenstände und/oder chemische Flüssigkeiten bzw. Materialien auf das Bett.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes spielen.


## d) Sicherungsaustausch

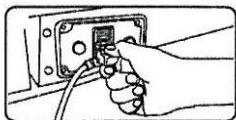


1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose

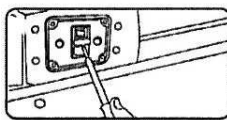

2. Ziehen Sie den Sicherungshalter mit dem Schraubenzieher heraus.

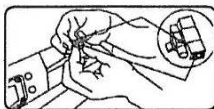

3. Tauschen Sie die Sicherung aus

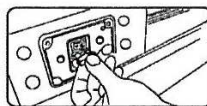

4. Drücken Sie die Sicherung in die richtige Position zurück

## 5. Produktspezifikationen

Technische Parameter:

1. Temperatur Einstellung: 40°C-55°C (5°C Schritte)
2. Zeit Einstellung: 60 Minuten (Auto); 5-95 Minuten (Manuell; 5 Min. Schritte)
3. Arbeitstemperatur: 5°C-40°C
4. Netzspannung: 230 VAC
5. Leistung: 150 W
6. Frequenz: 50 Hz

## 6. Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

